


EXPERT

SISTEMA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL PARA ARTICULAÇÕES SEM NÓ

PORTUGUÊS 

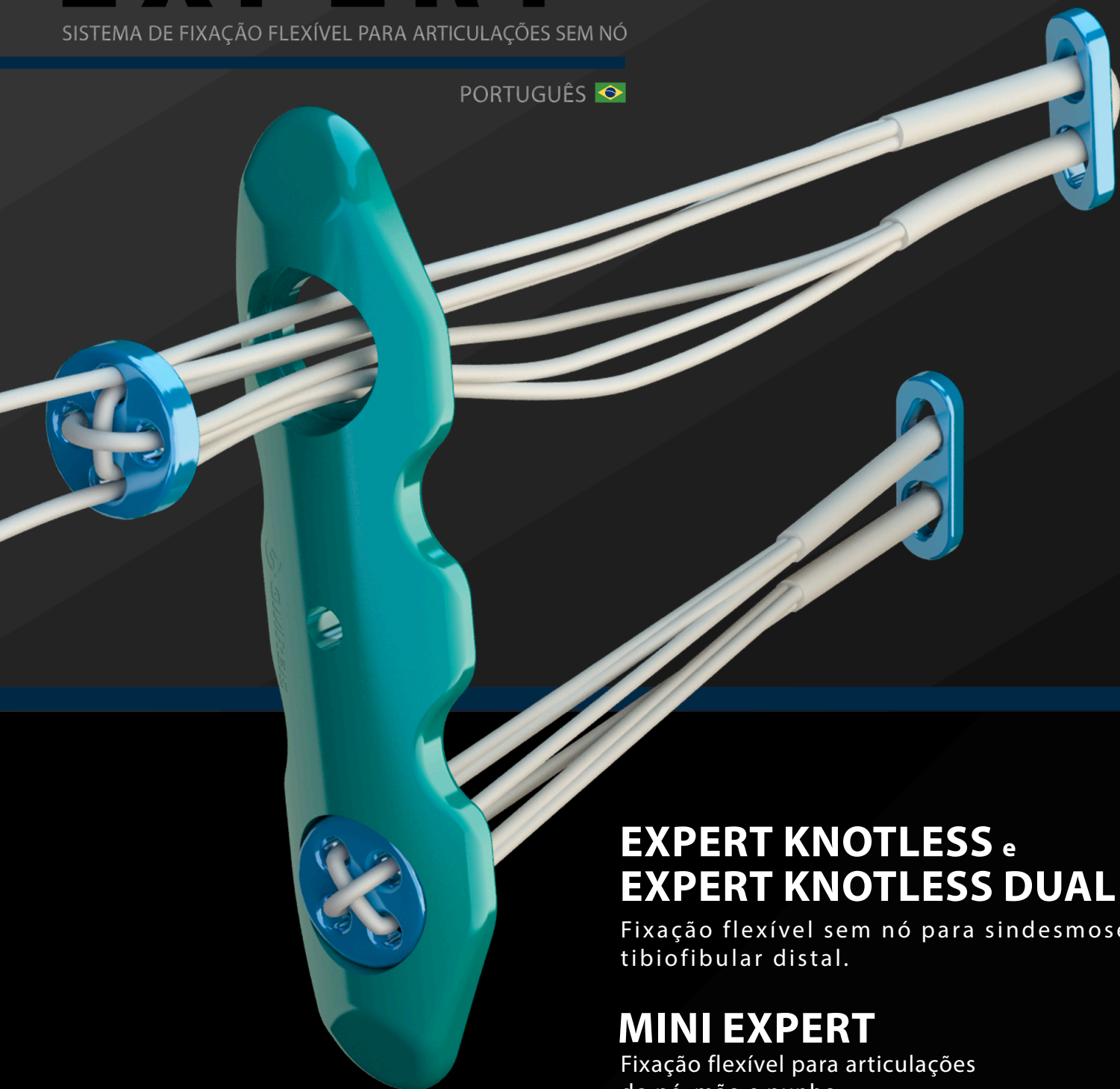

EXPERT KNOTLESS e EXPERT KNOTLESS DUAL

Fixação flexível sem nó para sindesmose tibiofibular distal.

MINI EXPERT

Fixação flexível para articulações do pé, mão e punho.



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة



Fixação flexível da sindesmose com Expert Knotless.



Expert Knotless combinado com Placa Versalock de Fíbula Anatômica GMReis.




Fixação flexível dupla da sindesmose com Expert Knotless Dual.

Placa de Sustentação para Sindesmose amplia a área de contato do sistema de fixação flexível duplo com a fíbula.

Os produtos Expert Knotless e Expert Knotless Dual foram desenvolvidos para a fixação flexível da sindesmose tibiofibular distal, no tratamento das lesões instáveis do tornozelo, com ou sem fratura associada.

Expert Knotless

Agulha e fios para transporte do Expert pelos túneis da fíbula e da tíbia.

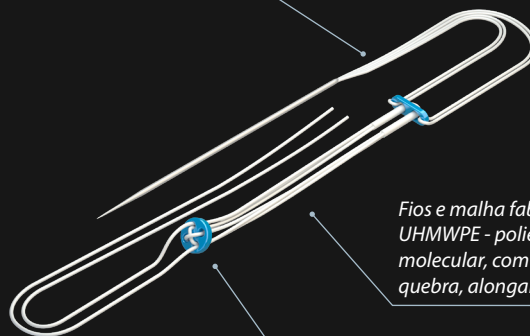


Fios e malha fabricados com o polímero UHMWPE - polietileno de ultra alto peso molecular, com alta resistência contra: quebra, alongamento e abrasão.

Implantes metálicos confeccionadas em Titânio conforme norma ASTM F 136.

- Menor índice de complicações relacionadas com a falha dos implantes comparado à fixação rígida com parafuso;
- Possibilidade de uso do Expert Knotless individualmente, em par ou através de orifício de placas para a fíbula GMReis e,
- Expert Knotless Dual indicado especialmente para pacientes com: sobrepeso, osteoporose, atletas de alto rendimento e lesões com severa instabilidade no plano sagital (antero posterior).

Expert Knotless Dual

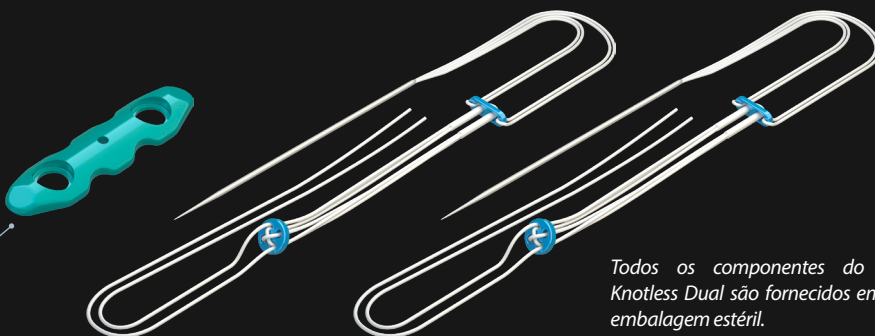

Todos os componentes do Expert Knotless Dual são fornecidos em única embalagem estéril.

MINI EXPERT

O Mini Expert foi desenvolvido para o tratamento de lesões ligamentares através de fixação flexível de articulações das extremidades: pé, mão e punho.

Indicações:


- Pé: fixação flexível de lesão da Lisfranc, correção do "hallux varus" e "hallux valgus";
- Mão: suspensoplastia em procedimentos de trapezectomia ou hemi-trapezectomia no tratamento da rizartrose;
- Punho: fixação flexível da articulação radioulnar distal nas lesões traumáticas instáveis do punho, e lesões da membrana interóssea - Essex Lopresti e,
- Possibilidade de uso conjunto do Mini Expert com as âncoras Fastlock para fixação com perfil zero (sem nós) evitando desconforto do paciente.



Mini Expert utilizado para fixação flexível da Lisfranc.




Suspensoplastia no tratamento da rizartrose com Mini Expert.

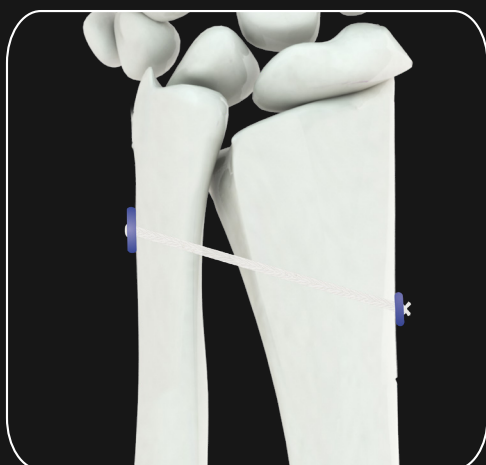

Mini Expert para fixação flexível da articulação radioulnar distal no tratamento da instabilidade do punho.

Mini Expert

Agulha e fio para transporte do Mini Expert pelos túneis ósseos.

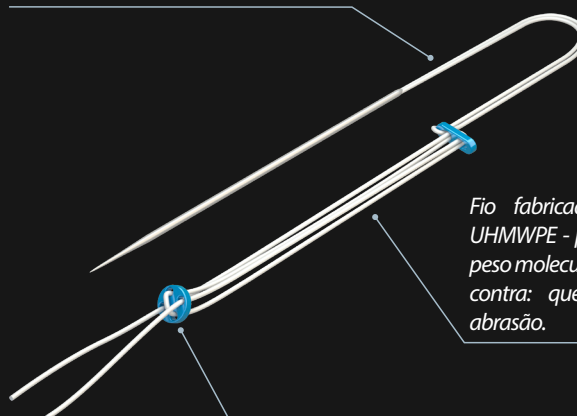

Fio fabricado com o polímero UHMWPE - polietileno de ultra alto peso molecular, com alta resistência contra: quebra, alongamento e abrasão.

Implantes metálicos confeccionadas em Titânio conforme norma ASTM F 136.

ILA - INTERNAL LIGAMENT AUGMENTATION



Fixação Flexível da Lisfranc com perfil zero utilizando o Mini Expert combinado com âncoras Fastlock GMReis.



Suspensoplastia do primeiro metacarpo com perfil zero utilizando o Mini Expert combinado com âncora Fastlock Ø3.5 mm SA GMReis.

Expert - Fixadores de Articulação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
312-2000	Expert Knotless - Fixador de Articulação Sem Nó
314-2000	Experto Knotless Dual - Fixador de Articulação Sem Nó Duplo
311-2000	Mini Expert - Fixador de Articulação

Todos os produtos Expert são fornecidos em embalagem estéril que garantem a integridade do produto.

Kit de Instrumental Expert

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
314-100	Pinça para Sindesmose
310-01-10	Protetor de Partes Moles Ø2.7 mm / Ø3.8 mm
311-2000	Guia do Fio Ø1.0 mm - Broca Ø2.7 mm
310-01-11	Guia do Fio Ø1.0 mm - Broca Ø3.8 mm
311-01-06	Broca Ø2.7 mm / Ø1.2 mm x 180.0 mm
310-01-08	Broca Ø3.8 mm / Ø1.2 mm x 180.0 mm
310-01-08-S	Broca Ø3.8 mm x 180.0 mm
310-01-07	Fio Guia Ø1.0 mm x 250.0 mm
310-16-100	Fio Guia Ø1.6 mm x 80.0 mm
172-17	Fio Guia Ø2.0 x 150.0 mm



MATRIZ | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br